

color

# Anal swab collection kit

Please read all instructions before swabbing.

## Read first

- Read all instructions carefully.
- Wash your hands before collecting your sample.
- Do not drink alcohol on the day of collection.
- The collection tube contains liquid. **DO NOT EMPTY THE LIQUID FROM THE COLLECTION TUBE.**

## | This kit includes:


1 collection tube



1 anal swab




1 biohazard bag  
(with absorbent pad)

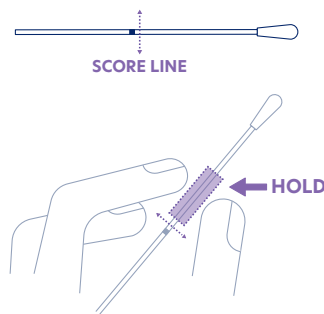


1

Take the swab out of its packaging. Hold the swab between the faint score line and the cotton-tipped part of the swab.

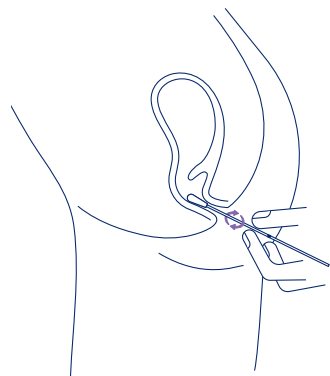


2

Insert the swab 1-2 inches (3-5 cm) into the anus. Gently turn the swab for 5-10 seconds. Carefully take out the swab.

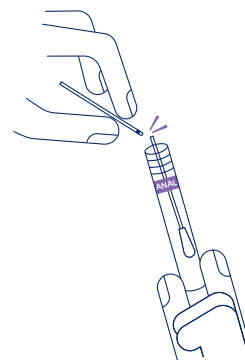


3

Find the collection tube marked with a purple "ANAL" label. Put the swab in the collection tube with the soft tip facing down. Break the swab by bending it against the collection tube. The end of the swab will snap off. Discard the end of the swab.

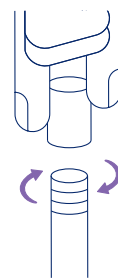

4

Twist the lid tightly shut on the collection tube. Do not break the foil top of the tube.

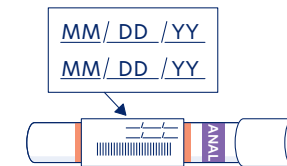

5

Write your date of birth and the collection date (today's date) in MM/DD/YY format onto the tube where noted.



6

Put the tube into an empty biohazard bag. Do not remove the absorbent pad that's in the biohazard bag. Make sure the seal of the bag is closed completely.

color

# Kit de toma de muestra con hisopo rectal

Lea las instrucciones completas antes de tomar la muestra.

## Lea primero

- Lea todas las instrucciones con atención.
- Lávese las manos antes de tomar la muestra.
- No beba alcohol el día de la toma de la muestra.
- El tubo de la toma de muestra contiene líquido. **NO VACÍE EL LÍQUIDO DEL TUBO DE TOMA DE MUESTRA.**

## Este kit incluye:


1 tubo de toma de muestra



1 hisopo rectal




1 bolsa para desechos biológicos (con almohadilla absorbente)

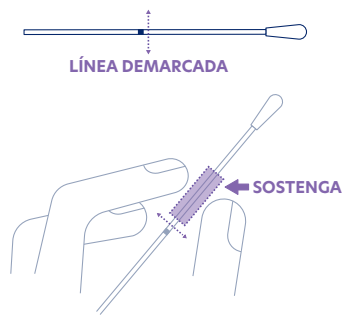


1

Retire el hisopo del empaque. Sostenga el hisopo entre la tenue línea demarcada y la parte del hisopo con la punta de algodón.

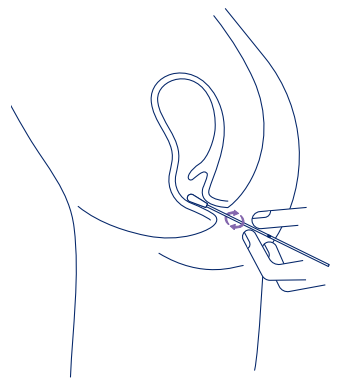


2

Introduzca el hisopo de 1 a 2 pulgadas (3 a 5 cm) en el recto. Gire suavemente el hisopo durante 5 a 10 segundos. Retire el hisopo con cuidado.

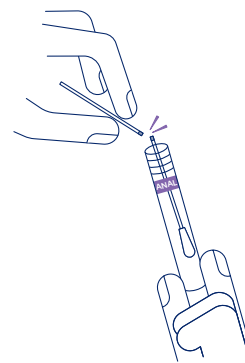


3

Tome el tubo de toma de muestra marcado con la etiqueta morada que dice "ANAL". Introduzca el hisopo en el tubo de toma de muestra con la punta suave hacia abajo. Rompa el hisopo doblándolo haciendo presión contra el tubo de toma de muestra. El extremo del hisopo se desprenderá. Deseche el extremo del hisopo.

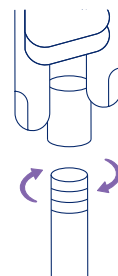

4

Gire la tapa firmemente para cerrar el tubo de toma de muestra. No rompa la parte superior de aluminio del tubo.

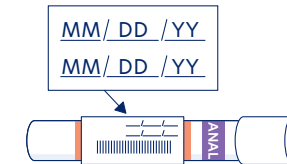

5

Escriba su fecha de nacimiento y la fecha de recolección (la fecha de hoy) en el formato de EE.UU. MM/DD/AA en la parte que se indica en el tubo.



6

Coloque el tubo en una bolsa de desechos biológicos vacía. No retire la almohadilla absorbente que viene dentro de la bolsa. Asegúrese de que la bolsa esté completamente sellada.