

color

Oral swab collection kit

Please read all instructions before swabbing.

Read first

- Read all instructions carefully.
- Wash your hands before collecting your sample.
- Do not eat, drink, smoke, or brush your teeth for 30 minutes before swabbing your throat.
- Do not drink alcohol on the day of collection.
- The collection tube contains liquid. **DO NOT EMPTY THE LIQUID FROM THE COLLECTION TUBE.**

This kit includes:


1 collection tube



1 oral swab




1 biohazard bag
(with absorbent pad)

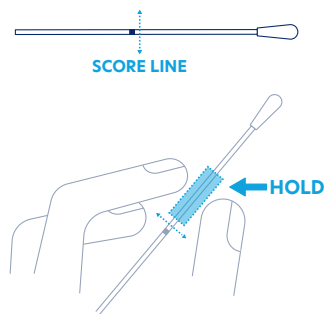


1

Take the swab out of its packaging. Hold the swab between the faint score line and the cotton-tipped part of the swab.

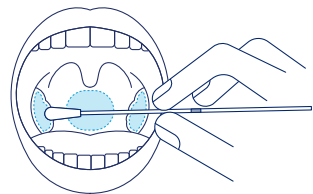


2

Put the swab into your mouth and rub the swab tip against the sides and back of your throat for 10 seconds. Don't touch your cheeks or tongue. Carefully take out the swab.

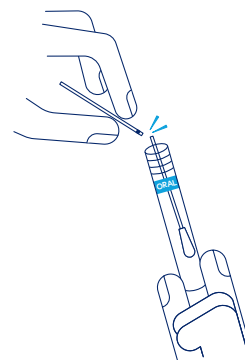


3

Find the collection tube marked with a blue "ORAL" label. Put the swab in the collection tube with the soft tip facing down. Break the swab by bending it against the collection tube. The end of the swab will snap off. Discard the end of the swab.

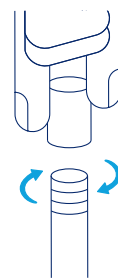

4

Twist the lid tightly shut on the collection tube. Do not break the foil top of the tube.

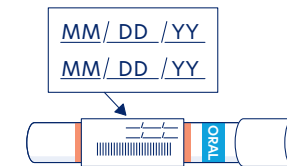

5

Write your date of birth and the collection date (today's date) in MM/DD/YY format onto the tube where noted.



6

Put the tube into an empty biohazard bag. Do not remove the absorbent pad that's in the biohazard bag. Make sure the seal of the bag is closed completely.

color

Kit de toma de muestra con hisopo oral

Lea las instrucciones completas antes de tomar la muestra.

Lea primero

- Lea todas las instrucciones con atención.
- Lávese las manos antes de tomar la muestra.
- No coma, beba, fume, ni se lave los dientes durante los 30 minutos antes de tomar la muestra de su garganta con el hisopo.
- No beba alcohol el día de la toma de la muestra.
- El tubo de la toma de muestra contiene líquido. **NO VACÍE EL LÍQUIDO DEL TUBO DE TOMA DE MUESTRA.**

Este kit incluye:


1 tubo de toma de muestra



1 hisopo oral




1 bolsa para desechos biológicos (con almohadilla absorbente)

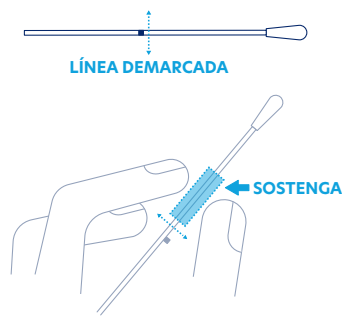


1

Retire el hisopo del empaque. Sostenga el hisopo entre la tenue línea demarcada y la parte del hisopo con la punta de algodón.

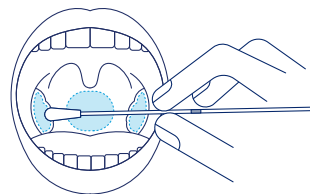


2

Introduzca el hisopo en su boca y frote la punta del hisopo contra los lados y la parte posterior de su garganta durante 10 segundos. No toque sus mejillas ni lengua. Retire el hisopo con cuidado.

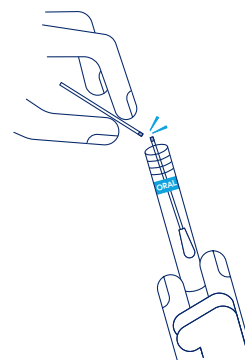


3

Tome el tubo de toma de muestra marcado con la etiqueta azul que dice "ORAL". Introduzca el hisopo en el tubo de toma de muestra con la punta suave hacia abajo. Rompa el hisopo doblándolo haciendo presión contra el tubo de toma de muestra. El extremo del hisopo se desprenderá. Deseche el extremo del hisopo.

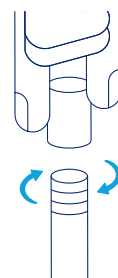

4

Gire la tapa firmemente para cerrar el tubo de toma de muestra. No rompa la parte superior de aluminio del tubo.

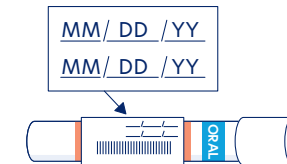

5

Escriba su fecha de nacimiento y la fecha de recolección (la fecha de hoy) en el formato de EE.UU. MM/DD/AA en la parte que se indica en el tubo.



6

Coloque el tubo en una bolsa de desechos biológicos vacía. No retire la almohadilla absorbente que viene dentro de la bolsa. Asegúrese de que la bolsa esté completamente sellada.