

color

Urine collection kit

Please read all instructions before collecting your urine.


Read first

- Read all instructions carefully.
- Wash your hands before collecting your sample.
- Do not drink alcohol on the day of urine collection.
- Do not collect urine during your period or within 24 hours of intercourse.
- The collection tube contains liquid. **DO NOT EMPTY THE LIQUID FROM THE COLLECTION TUBE.**

| This kit includes:



1 collection tube

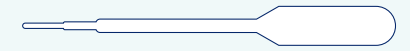

1 pipette (dropper)



1 collection cup



1 biohazard bag (with absorbent pad)




1

Do not pee for at least 1 hour before collection. It's best to collect your urine first thing in the morning.




2

Pee directly into the collection cup. It should be almost half filled.

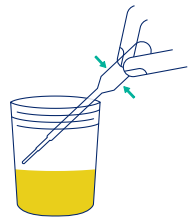


3

Use the pipette (dropper) to transfer your urine from the collection cup into the collection tube marked with a green "URINE" label.

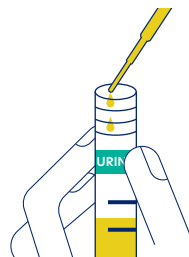


4

Fill the tube until the combined liquid is between the two black lines. Do not fill the tube past the maximum fill line. The lab cannot accept the tube if it's too full.

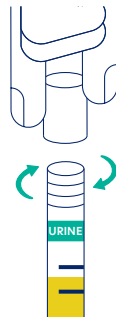

5

Twist the lid tightly shut on the collection tube. Do not break the foil top of the tube.

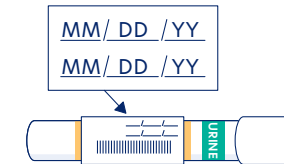

6

Write your date of birth and the collection date (today's date) in MM/DD/YY format onto the tube where noted.



7

Put the tube into an empty biohazard bag. Do not remove the absorbent pad that's in the biohazard bag. Make sure the seal of the bag is closed completely.

color

Kit de toma de muestra de orina

Lea las instrucciones completas antes de tomar la muestra.

Lea primero

- Lea todas las instrucciones con atención.
- Lávese las manos antes de tomar la muestra.
- No beba alcohol el día de la toma de la muestra.
- No tome la muestra durante su periodo ni en las 24 horas después de haber tenido relaciones sexuales.
- El tubo de la toma de muestra contiene líquido. **NO VACÍE EL LÍQUIDO DEL TUBO DE TOMA DE MUESTRA.**

Este kit incluye:



1 tubo de toma de muestra



1 pipeta (gotero)



1 recipiente de muestra de orina



1 bolsa para desechos biológicos (con almohadilla absorbente)




1

No orine durante al menos 1 hora antes de tomar la muestra. Lo mejor es tomar la muestra de orina a primera hora de la mañana.




2

Orine directamente en el recipiente de muestra de orina. Debe llenarlo hasta casi la mitad.

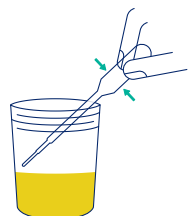


3

Use la pipeta (gotero) para transferir la orina del recipiente de muestra de orina al tubo de toma de muestra marcado con una etiqueta verde que dice "URINE".

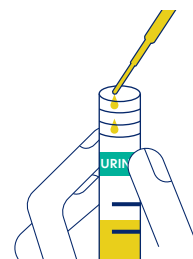


4

Llene el tubo hasta que el líquido combinado esté entre las dos líneas negras. No llene el tubo más allá de la línea de llenado máximo. El laboratorio no puede aceptar el tubo si está muy lleno.

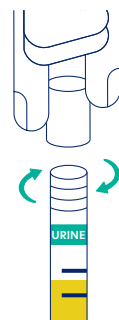

5

Gire la tapa firmemente para cerrar el tubo de toma de muestra. No rompa la parte superior de aluminio del tubo.

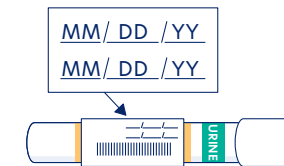

6

Escriba su fecha de nacimiento y la fecha de recolección (la fecha de hoy) en el formato de EE.UU. MM/DD/AA en la parte que se indica en el tubo.



7

Coloque el tubo en una bolsa de desechos biológicos vacía. No retire la almohadilla absorbente que viene dentro de la bolsa. Asegúrese de que la bolsa esté completamente sellada.